



Leica BM E

Sistema de Microscopio Compuesto

Los Grandes Descubrimientos
Empiezan Con Visión

Leica
MICROSYSTEMS

Sistemas. Soluciones. Leica.

Visión para la próxima generación.

Resultados superiores. Construcción duradera. Características únicas. En el diseño del Leica BM E se ha prestado una atención minuciosa a cada uno de los componentes del microscopio a fin de crear un instrumento sencillo, de excelentes características funcionales, único en su clase. El BM E es el resultado de la visión de Leica Microsystem a la hora de diseñar un microscopio que realmente se adapte a las necesidades de los usuarios y que ofrezca un sistema de microscopía de gran flexibilidad.

Visión para ver con total claridad.

El BM E utiliza la nueva óptica de la serie E diseñada por los ingenieros ópticos de Leica para proporcionar un alto contraste, nitidez y poder de resolución. La calidad del vidrio óptico y el diseño se combinan en un sistema muy superior a la media de los microscopios de su clase:

- **Óptica Leica serie E₁** totalmente de cristal, de corrección finita y alta calidad para formar imágenes brillantes y de alto contraste. ¡Convertible a óptica Leica serie E₂ para obtener, si cabe, resultados de mayor calidad!
- Garantía contra hongos y moho para proteger tanto el microscopio como su inversión.
- Objetivos de grandes aumentos retráctiles para evitar la rotura de los portaobjetos.
- Ocular 10x de campo 18mm (estándar) que optimiza el campo visual para operar fácilmente y con comodidad.
- Oculares que permiten una gran selección de retículos de 21 mm.
- Protectores de ocular de goma que se pueden utilizar con o sin gafas y que sirven para bloquear la luz ambiental.

Visión para iluminar.

El sistema de iluminación del BM E está diseñado para proporcionar la máxima calidad de imagen en una gran variedad de aplicaciones. Las características incluyen:

- **Diseño** que cumple o excede las normas internacionales de seguridad.
- **Disponibilidad** de iluminación fluorescente o halógena de tungsteno.
- **Iluminación de larga duración:** la iluminación fluorescente ofrece 10.000 horas de luz brillante y fría, y la halógena proporciona 2000 horas de luz estable y equilibrada.
- **Puerta inclinada** para la iluminación halógena que impide la rotura accidental de la lámpara.
- **Lámpara fácil de cambiar** que reduce el tiempo improductivo

■ **EXCLUSIVO DE LEICA**

Los grandes descubrimientos empiezan con visión.




André-Marie Ampère
1775-1836

Ampère, matemático, físico y químico, definió la relación entre la electricidad y el magnetismo mediante una demostración matemática (ley de Ampère).




Óptica Leica serie E₁ de calidad superior, mejorable a óptica Leica serie E₂

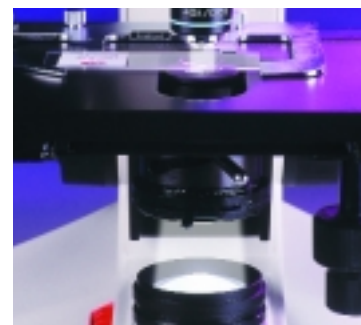

Disponibilidad de iluminación fluorescente o halógena de tungsteno

Campo claro - Escamas de polilla

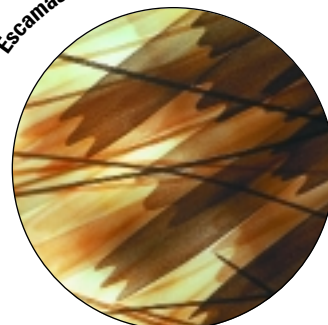



Confianza en Leica

Visión para proporcionar comodidad y conveniencia.

Si está buscando un microscopio de calidad que le ofrezca lo último en ergonomía a una excelente relación calidad / precio, estudie con detalle el microscopio compuesto Leica BM E.

- Tamaño compacto con todos los mandos al alcance de la mano.
- Posición baja de los mandos de la platina mecánica, de manera que se reduce el movimiento de la muñeca.
- Diseño elegante y atractivo.
- Mandos de enfoque macro y micrométricos coaxiales precisos y fáciles de usar.
- Revólver de precisión para lograr una excelente parfocalidad y parcentricidad.
- Tamaño compacto que facilita su manejo y simplifica la manipulación de las preparaciones.
- Baja emisión de calor, para trabajar con comodidad.
- Filtro azul incorporado en los modelos con iluminación halógena de tungsteno, para evitar que se pierda accidentalmente.
- Tubos de observación inclinados 45° y con giro de 360° para facilitar la co-observación, pero que previenen que el equipo sea desmontado.

Visión para proporcionar todos los accesorios.

El BM E cuenta con un amplio surtido de accesorios que permiten satisfacer sus necesidades particulares:

- Modificable a la óptica de nivel superior: Leica serie **E₂**
- Elección entre platinas fijas o mecánicas con condensadores Abbe o de diafragma de disco.
- Fotomicrografía a través de cámaras de 35 mm adaptables al ocular.
- Accesorios de video fijos o independientes.
- Estuches rígidos de madera o blandos de nicón, acolchados, para guardar y transportar el microscopio

■ **EXCLUSIVO DE LEICA**




Los accesorios de vídeo de Leica convierten el BM E en un equipo más polivalente.



Accesorios fotográficos para adaptar al microscopio


Los grandes descubrimientos empiezan con visión.

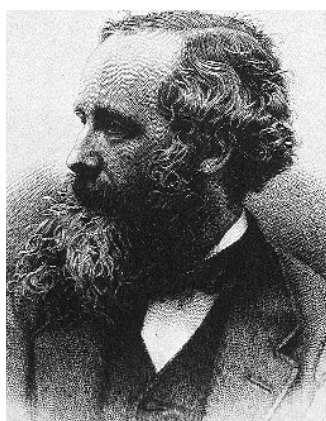

James Clerk Maxwell
1831-1879

Los experimentos de Maxwell demostraron que la luz y la electricidad están estrechamente relacionadas. Fue él quien demostró que existe un amplio espectro de ondas electromagnéticas que vibran a distintas frecuencias que son imposibles de percibir a través del ojo humano.

Campo claro – Madera petrificada

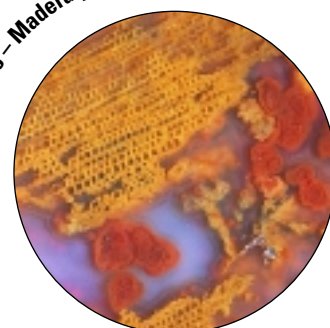

Especificaciones Leica BM E

TUBOS DE OBSERVACIÓN

- Óptica recubierta, totalmente de cristal y alta calidad
- Ángulo de observación a 45°, rotación 360°
- Llave Allen estándar (1.5 mm) combinado con tornillo para facilitar el giro del tubo
- Garantía antihongos / moho
- Monocular**
 - Tubo de observación con un solo ocular
- Monocular de enseñanza**
 - Ángulos de observación vertical y 45°
 - Divisor de luz recubierto 50 / 50
- Binocular**
 - Oculares enfocables
 - Rango de distancia interpupilar (IPD) 54mm a 74mm
- Video**
 - 1/2" o 1/3"

OCULARES E₁


- Óptica recubierta, totalmente de cristal y alta calidad
- Objetivos E₂ combinables con oculares E₂ y objetivos E₁ combinables con oculares E₁
- Garantía antihongos / moho
- 5x, 20 mm FOV
- 10x, 18mm FOV
- 15x, 13mm FOV
- Protectores de ocular de goma**
 - Incluido con todos los oculares
 - Diámetro 34.2mm (1.35"), altura 10mm (0.4")
 - Plegables sobre el ocular
- Retículos**
 - Acepta discos de 21mm de diámetro
 - A utilizar en oculares 10x sin puntero y 15x

OBJETIVOS

	Aumento	Apertura numérica	Distancia de trabajo	Cubreobjetos
E₁ Acromáticos	4x	0,10	13,0mm	
	10x	0,25	2,50mm	0,17
	40x	0,65	0,48mm	0,17
	100x (Aceite)	1,25	0,10mm	0,17
E₂ Acromáticos	4x	0,10	24,43mm	-
	10x	0,25	4,46mm	0,17
	40x	0,65	0,45mm	0,17
	100x (Aceite)	1,25	0,14mm	0,17
E₂ Planacromáticos	4x	0,10	8,50mm	-
	10x	0,25	1,40mm	0,17
	40x	0,65	0,37mm	0,17
	100x (Aceite)	1,25	0,11mm	0,17

DIMENSIONES Y PESO (con fluorescencia y tubo monocular)

- Construcción**
 - Carcasa de aluminio
- Dimensiones**
 - 38,40cm (alto) x 17,9cm (ancho) x 23,0cm (largo)
- Dimensiones con embalaje (largo)**
 - 44,45cm (alto) x 52,1cm (ancho) x 45,7cm
- Peso**
 - 3,74kg, 8,24 lbs.
- Peso con embalaje**
 - 8,8kg, 13,75 lbs.

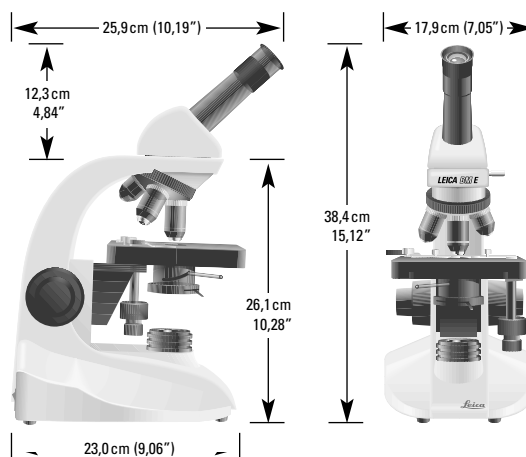

ADEMÁS

- Construcción**
 - Carcasa de aluminio
- Revólver**
 - Para cuatro objetivos con rotación interna
 - Recubrimiento de goma para facilitar el giro
- Iluminación**
 - Crítica o espejo
 - Lámpara halógena de Tungsteno: 2000 horas de vida, 20W
- Consideraciones Eléctricas**
 - Diseñado para cumplir los estándares internacionales de seguridad
- Halógena de Tungsteno**
 - 120VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
 - 220-240VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
- Fluorescente**
 - 120VAC $\pm 10\%$ 60 Hz
 - 220-240VCA $\pm 10\%$ 50/ 60Hz
- Platinas Fija**
 - Tamaño: 13.0cm (X) x 13.5cm (Y) 5,12" (X) x 4,88" (X)
- Mecánica**
 - Con mandos a la derecha
 - Tamaño: 13.5cm (X) x 13.5cm (Y) 5,12" (X) x 5,12" (Y)
 - Longitud del mando de control 8.2cm, 3.23"
 - Desplazamientos: 7.8cm (X) x 3.6cm (Y) 3,07" (X) x 1,42" (Y)
 - Pinza portamuestras para un portaobjetos estándar
- Desplazamiento del condensador**
 - Mecanismo que incluye leva y cojinetes de bola
- Condensadores**
 - Diafragma de disco 0.65 A.N.
 - Condensador estándar tipo Abbe 0.90 / 1.25 aceite
 - Apertura mínima: 1.3 \pm 1mm
 - Apertura máxima: 29mm
 - Admite láminas de campo oscuro y contraste de fases
- Filtros**
 - Iluminación crítica: azul o verde difusos
 - Iluminación Koehler: azul o verde
- Mecanismo de enfoque**
 - Mandos macrométrico y micrométrico coaxiales con marcas en cada lado del mando micrométrico
 - 100 divisiones de 4 micras cada una
 - Una vuelta completa del mando micrométrico equivale a 400 micras
 - Una vuelta completa del mando macrométrico equivale a 4 mm
- Técnicas de contraste**
 - Campo claro
- Miscelánea**
 - Funda, manual de instrucciones, y aceite de inmersión incluidos con cada modelo

Leica Microsystems Inc.
Educational and Analytical Division
PO Box 123
Buffalo, New York USA 14240-0123

Teléfono 716 686 3000
Fax 716 686 3085
www.leica-microsystems.com
Certificación ISO 9001

Leica